




# Qu'est-ce qu'un drain « Jackson-Pratt » ?

Le drain « Jackson-Pratt » est un tube qui empêche le sang et le liquide de s'accumuler à l'intérieur de votre corps. Il est installé près de la région où a eu lieu votre chirurgie.

Il est fait de 2 parties :

- Un tube inséré à l'intérieur de votre corps.
- Un réservoir de forme ovale attaché au bout du tube. Il permet aux liquides de sortir à l'extérieur de votre corps.

Les liquides s'écoulent dans le tube et s'accumulent dans le réservoir.

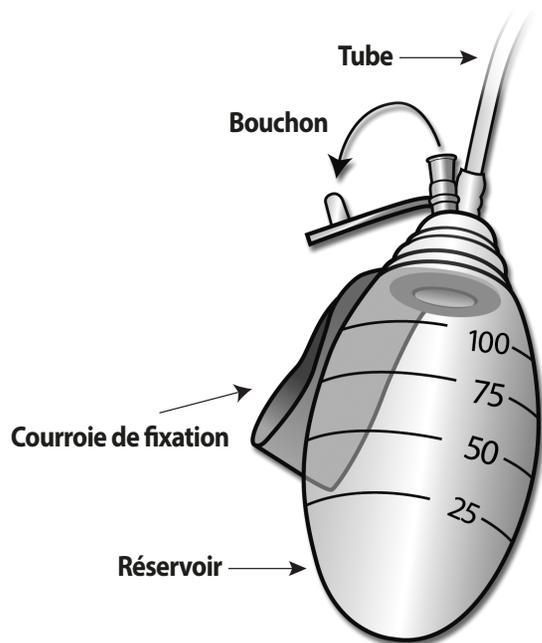

## Comment prendre soin de votre drain ?

- Toujours vous laver les mains avant et après avoir manipulé votre drain.
- Il est important que vous fixiez votre drain sur vos vêtements avec une épingle. Il doit être plus bas que le pansement pour que les liquides s'écoulent dans le réservoir.
- Vérifiez souvent le réservoir pour éviter qu'il soit trop plein (maximum au 2/3).
- Videz le réservoir au moins 2 fois par jour (plus souvent si nécessaire).
- Mesurez la quantité de liquide à chaque fois que vous videz votre drain.
- Écrivez la quantité de liquide sur la fiche d'inscription et apportez tous les résultats lors de votre visite à l'hôpital (ou à l'infirmière du CLSC).
- Lorsque la quantité de liquide aura diminuée, le drain pourra être enlevé par l'infirmière (à l'hôpital ou au CLSC).

*Si vous avez plus d'un drain,  
il est important de mesurer la  
quantité de liquide séparément.  
Vous devez noter la quantité  
de chacun des drains  
sur la fiche d'inscription.*

## Comment vider votre drain ?

- Lavez vos mains.
- Mettez une serviette propre (ou un piqué jetable) sur une surface ferme.
- Ouvrez et déposez le contenant gradué et un tampon d'alcool sur la serviette.
- Détachez le réservoir de vos vêtements et ouvrez doucement le bouchon.
- Videz le liquide dans le contenant gradué sans toucher le rebord pour prévenir la contamination.
- Vous pouvez comprimer doucement le réservoir au besoin pour faire sortir le liquide.
- Désinfectez l'ouverture du réservoir et le bouchon avec le tampon d'alcool.
- Faites le vide d'air du réservoir :
  1. Gardez le bouchon ouvert.
  2. Comprimez le réservoir avec une main pour vider l'air.
  3. En gardant le réservoir comprimé, fermez le bouchon avec l'autre main.
- Fixez le réservoir à vos vêtements.
- Mesurez la quantité de liquide du contenant gradué, écrivez la quantité et la couleur sur la fiche d'inscription.
- Videz le contenu dans la toilette. Rincez le contenant et jetez l'eau de rinçage dans la toilette. Remettez le couvercle sur le contenant gradué.
- Lavez vos mains.

